



## QUICK START GUIDE

# LITTLE Candy Corn™

accessibility switch

### WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Made with recycled content

EN June 18, 2021 1:57 PM

## 1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



## 2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



### To get started:

1. Connect switch plug to a device with a 3.5-mm / 1/8-in TS (mono) jack.
2. Turn switch on.
3. Hold hand or other part of body within 10-mm / 0.4-in of the activation area to activate your device.

*This device can do more! Full Instructions for Use are available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



### 3 Device Overview

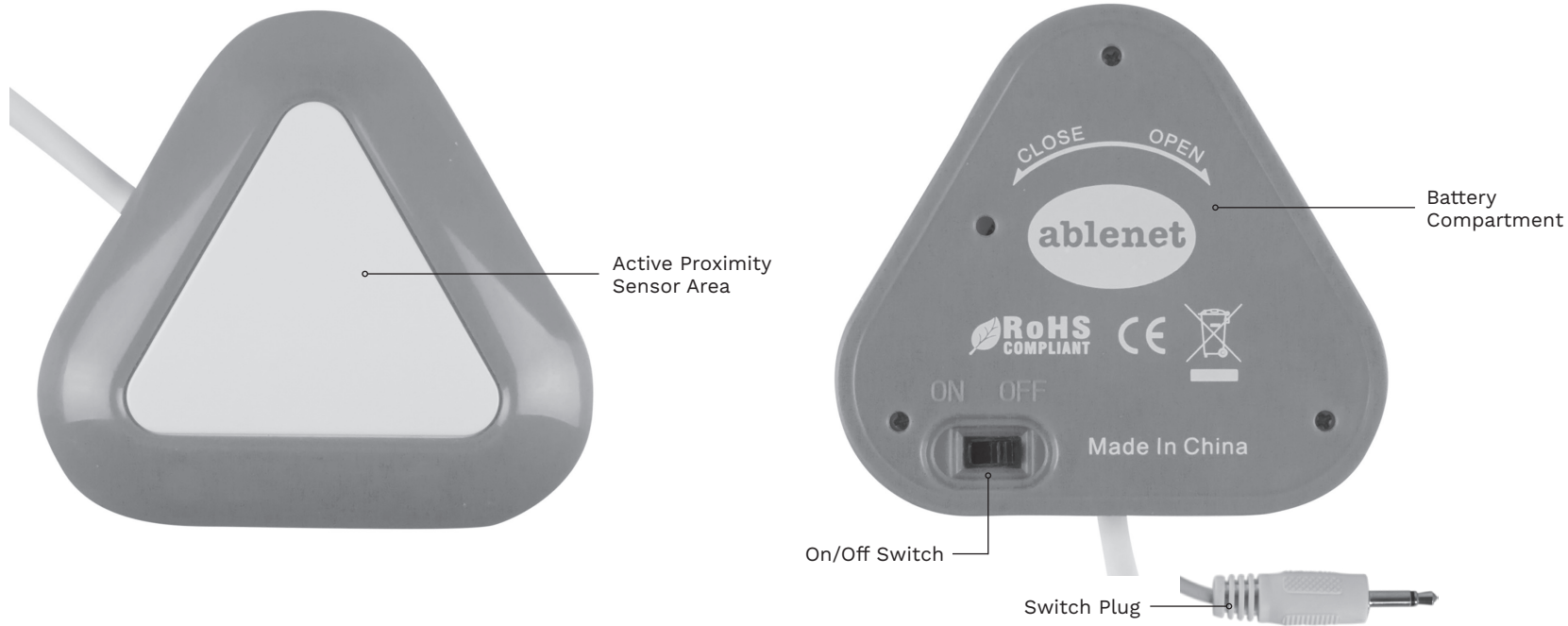

# AbleNet®

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### LITTLE Candy Corn™

commutateur d'accès

#### GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:57 PM

## 1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



## 2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



### Mise en route :

1. Branchez la prise du bouton à un appareil à l'aide d'une prise femelle mono de 3,5 mm (1/8 po).
2. Placez l'interrupteur en position Marche.
3. Tenez la main ou une autre partie du corps à 10 mm (0,4 po) de la zone d'activation pour activer l'appareil.

*Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



### 3 Vue d'ensemble de l'appareil

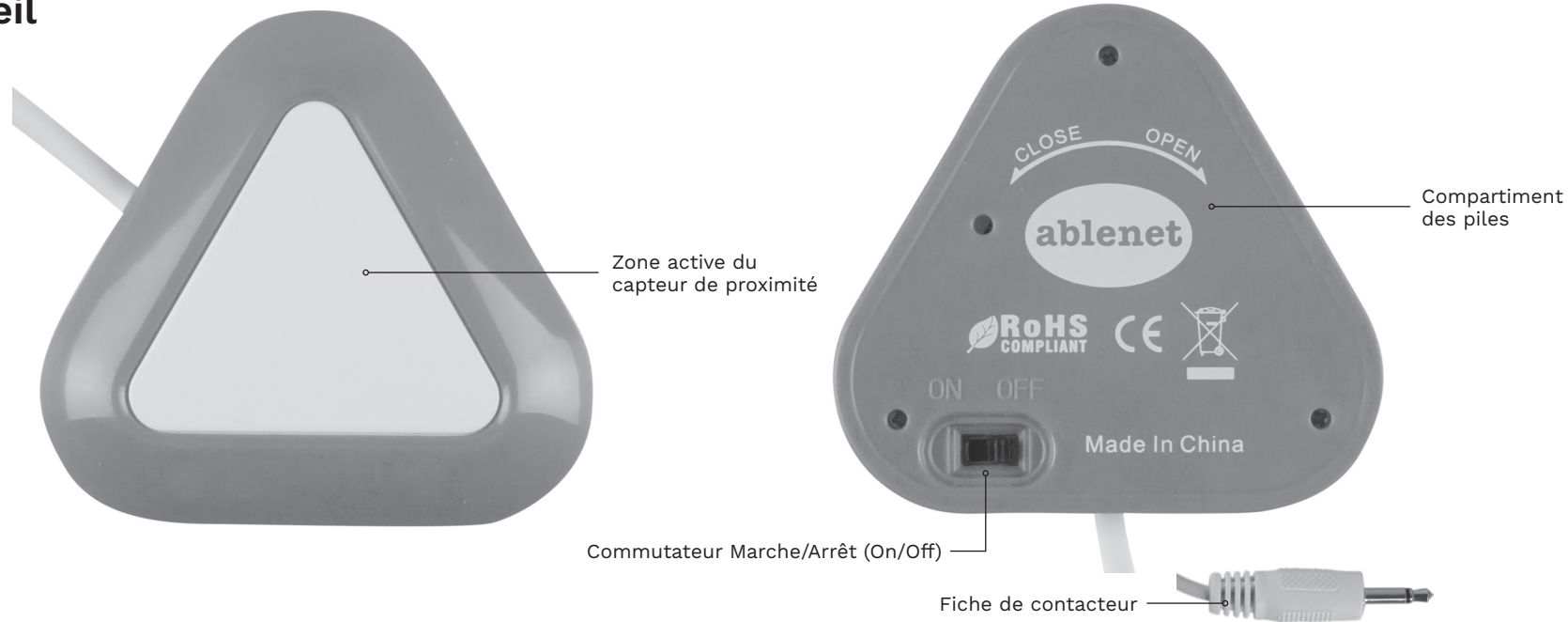

# AbleNet®

## KURZANLEITUNG

### LITTLE Candy Corn™

Zugänglichkeitsschalter

#### GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:57 PM

## 1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



## 2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



### Erste Schritte:

1. Verbinden Sie den Schalterstecker mit einem Gerät mit 3,5-mm / 1/8-in TS- (Mono)-Buchse.
2. Schalten Sie den Schalter ein.
3. Halten Sie Ihre Hand oder ein Teil Ihres Körpers innerhalb von 10-mm / 0,4-in an der Aktivierungsfläche, um Ihr Gerät zu aktivieren.

*Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.


Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



### 3 Geräteübersicht

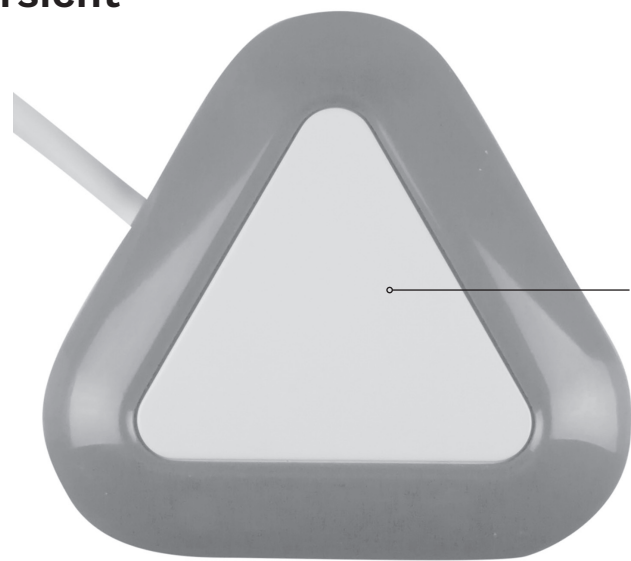

Aktiver  
Näherungssensorbereich

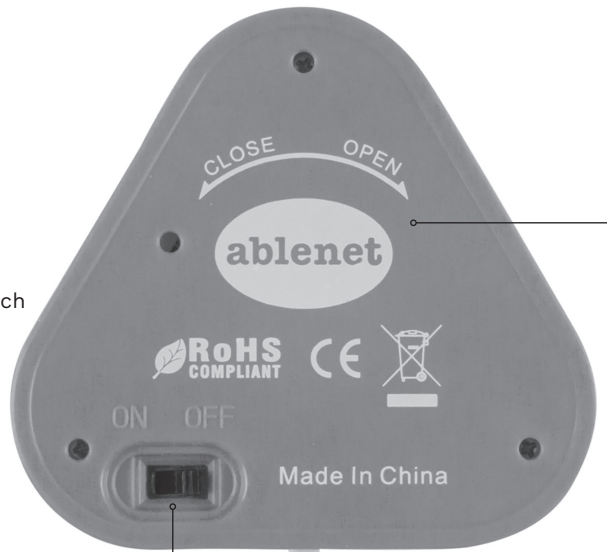

Batteriefach

Ein-/ Aus-Schalter

Taster-Stecker





## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# LITTLE Candy Corn™

Interruptor de accesibilidad

### GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:57 PM



## Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



## Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



### Para empezar:

1. Conecte el enchufe del interruptor a un dispositivo con un conector TS (mono) de 3,5 mm/1/8 pulgadas.
2. Encienda el interruptor.
3. Mantenga su mano u otra parte del cuerpo a 10 mm/0,4 pulgadas del área de activación para activar su dispositivo.

*¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.


Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



### 3 Descripción general del dispositivo

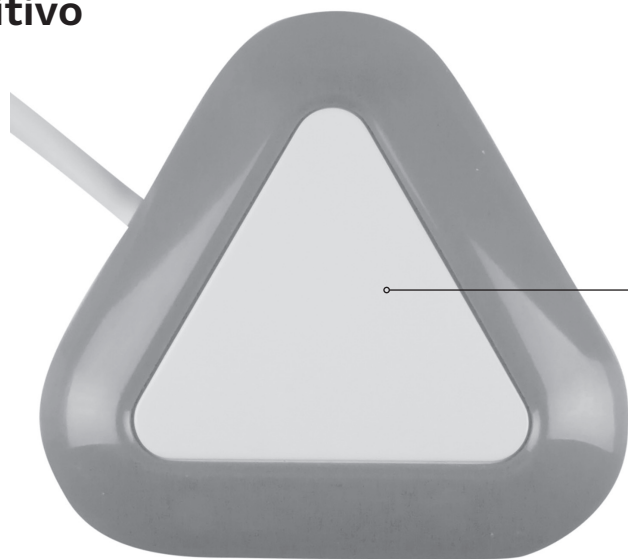

Área de sensor de proximidad activa

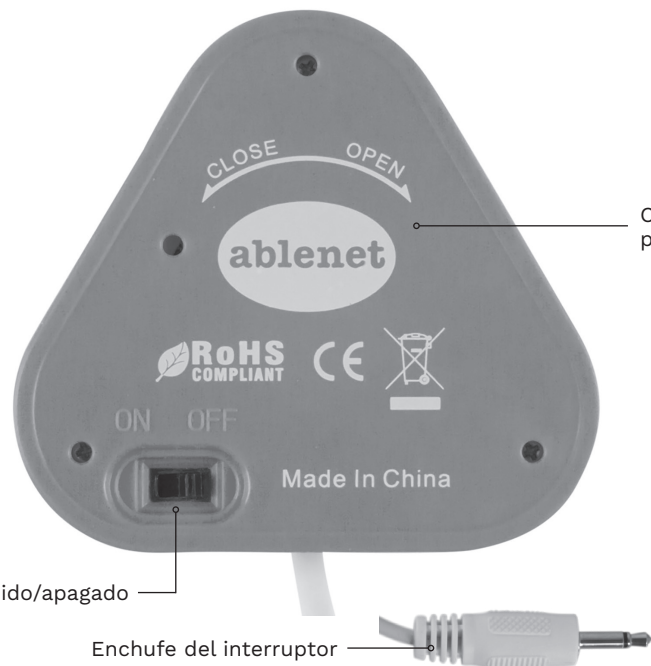

Compartimento para las pilas

Interruptor de encendido/apagado

Enchufe del interruptor