



QUICK START GUIDE

BIGtrack Wireless wireless computer mouse

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Made with recycled content

EN June 18, 2021 1:55 PM

1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



To get started - Bluetooth:

1. Insert two alkaline AA batteries into BIGtrack Wireless.
2. On the front of BIGtrack Wireless, move mode switch to left to select Bluetooth mode.
3. Select and pair the BIGtrack Wireless within the Bluetooth settings of your device. Please consult the Bluetooth pairing process for your device as needed.
4. Your mouse is now ready to use.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.

To get started - USB Wireless Receiver:




1. Insert two alkaline AA batteries into BIGtrack Wireless.
2. On the front of BIGtrack Wireless, move mode switch to the right to select USB wireless mode.
3. Remove USB wireless receiver from battery compartment and plug it into a USB A port on your device.
4. Your mouse is now ready to use.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



3 Device Overview

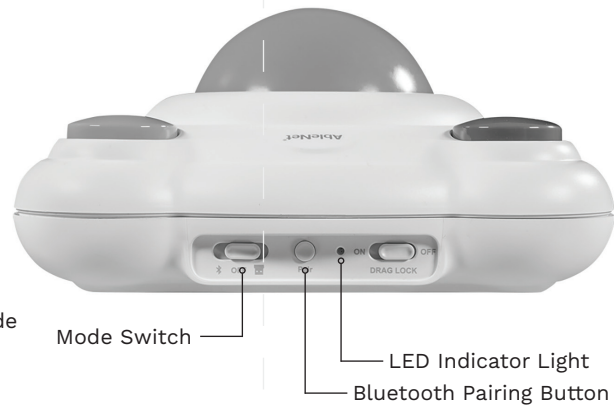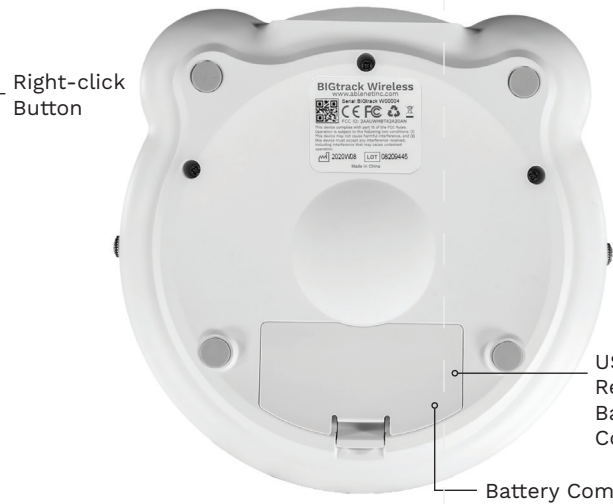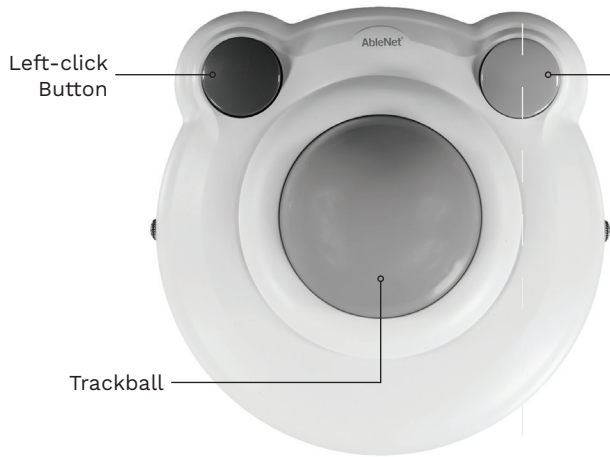



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BIGtrack Wireless souris d'ordinateur sans fil

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:55 PM

1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



Mise en route du Bluetooth :

1. Insérez deux piles alcalines AA dans le BIGtrack Wireless.
2. Sur le devant du BIGtrack Wireless, poussez le commutateur de mode vers la gauche pour sélectionner le mode Bluetooth.
3. Sélectionnez et appariez le BIGtrack Wireless depuis les réglages Bluetooth de votre appareil. Veuillez consulter les instructions d'appariement Bluetooth de votre appareil au besoin.
4. Votre souris est maintenant prête à être utilisée.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

Mise en route du récepteur USB sans fil :




1. Insérez deux piles alcalines AA dans le BIGtrack Wireless.
2. Sur le devant du BIGtrack Wireless, poussez le commutateur de mode vers la droite pour sélectionner le mode USB sans fil.
3. Retirez le récepteur USB sans fil du compartiment des piles et branchez-le dans un port USB A de votre appareil.
4. Votre souris est maintenant prête à être utilisée.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



3 Vue d'ensemble de l'appareil

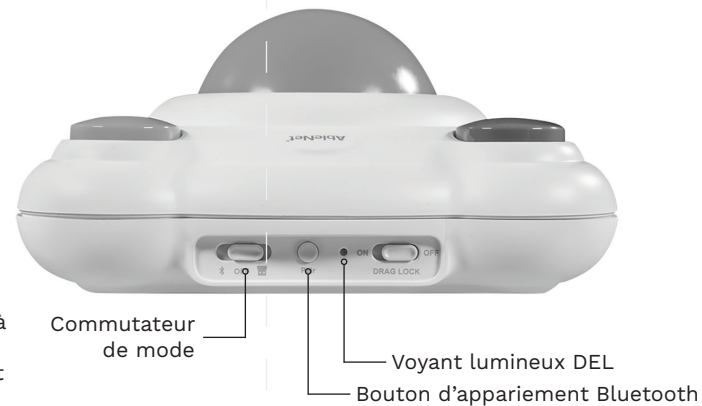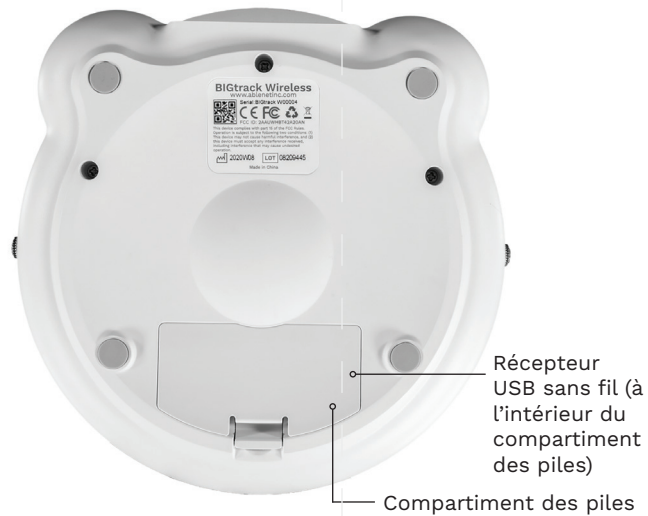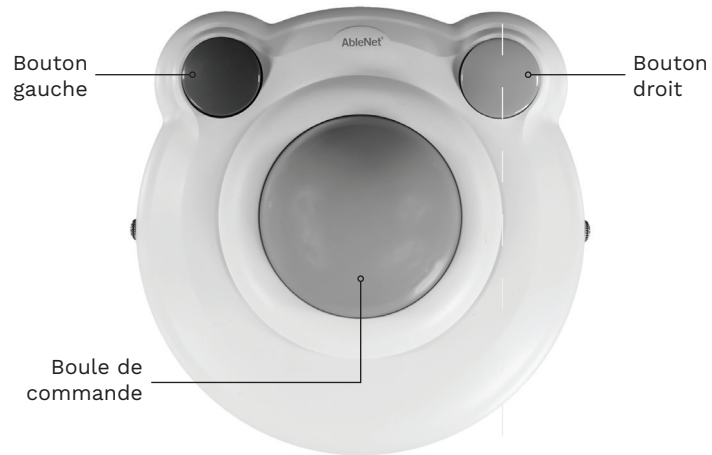

AbleNet®

KURZANLEITUNG

BIGtrack Wireless Funk-Computermaus

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:55 PM

1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



Erste Schritte - Bluetooth:

1. Setzen Sie zwei Alkaline AA-Batterien in das BIGtrack Wireless ein.
2. Stellen Sie auf der Vorderseite des BIGtrack Wireless den Modusschalter nach links, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
3. Wählen Sie das BIGtrack Wireless in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aus und paaren Sie sie. Bei Bedarf konsultieren Sie bitte den Bluetooth-Paarungsprozess für Ihr Gerät.
4. Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.

Erste Schritte - USB-Funkempfänger:




1. Setzen Sie zwei Alkaline AA-Batterien in das BIGtrack Wireless ein.
2. Stellen Sie auf der Vorderseite des BIGtrack Wireless den Modusschalter nach rechts, um den USB-Funk-Modus auszuwählen.
3. Nehmen Sie den USB-Funkempfänger aus dem Batteriefach und stecken Sie ihn in einen USB-A-Anschluss an Ihrem Gerät.
4. Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3 Geräteübersicht

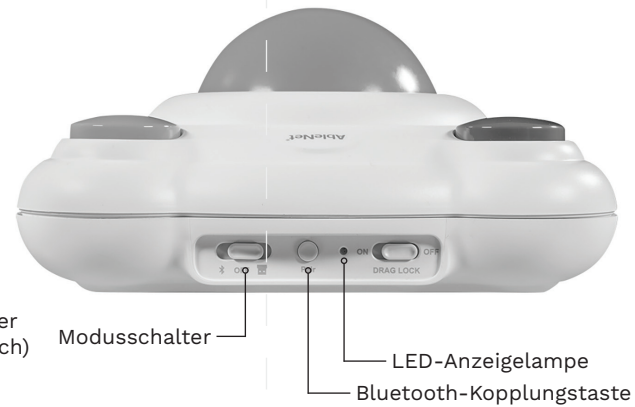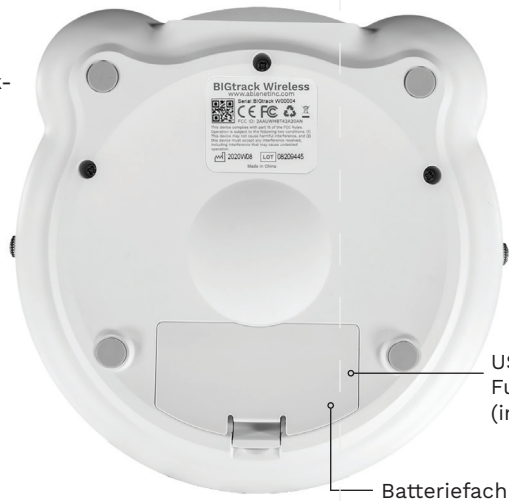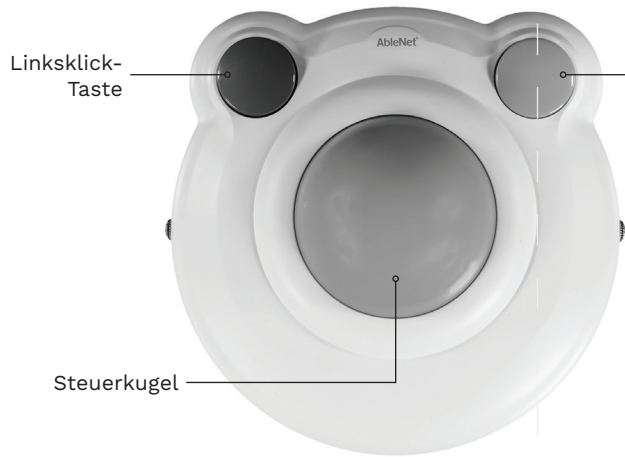



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BIGtrack Wireless

Ratón inalámbrico para ordenador

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:55 PM

1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



Para empezar - Bluetooth:

1. Inserte dos pilas AA alcalinas en BIGtrack Wireless.
2. En la parte delantera de BIGtrack Wireless, mueva el interruptor de modo hacia la izquierda para seleccionar el modo Bluetooth.
3. Seleccione y empareje BIGtrack Wireless dentro de la configuración de Bluetooth de su dispositivo. Consulte el proceso de emparejamiento de Bluetooth para su dispositivo según sea necesario.
4. Su ratón ya está listo para usar.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.

Para empezar - Receptor inalámbrico USB:


1. Inserte dos pilas AA alcalinas en BIGtrack Wireless.
2. En la parte delantera de BIGtrack Wireless, mueva el interruptor de modo hacia la derecha para seleccionar el modo inalámbrico USB.
3. Quite el receptor inalámbrico USB del compartimento para las pilas y conéctelo a un puerto USB A de su dispositivo.
4. Su ratón ya está listo para usar.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3 Descripción general del dispositivo

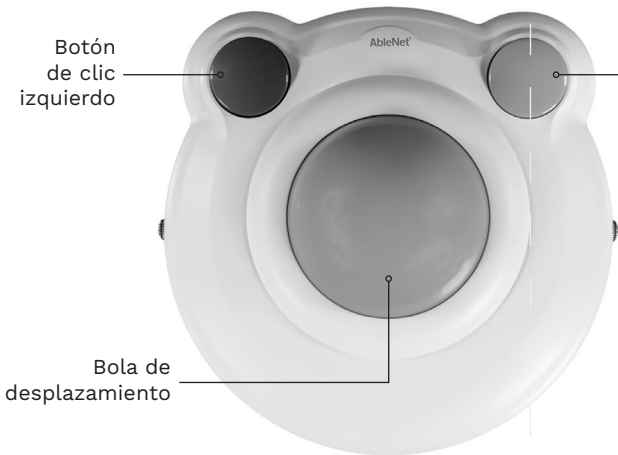


Botón de clic derecho



Receptor USB inalámbrico (compartimento interior para las pilas)

Compartimento para las pilas

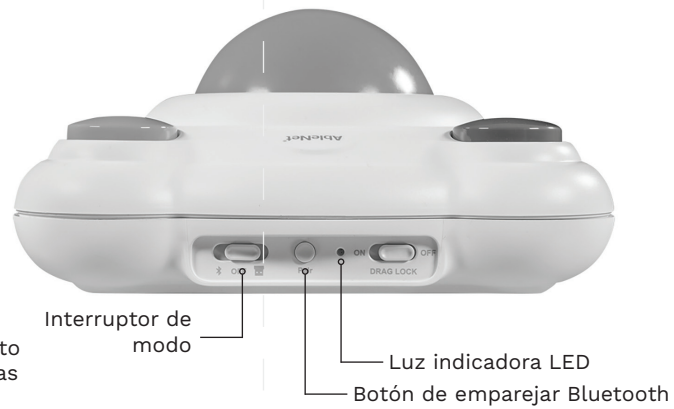

Interruptor de modo

Luz indicadora LED

Botón de emparejar Bluetooth