



QUICK START GUIDE

Jelly Beamer™

wireless accessibility switch

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Made with recycled content

1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



To get started:

1. Add two alkaline AA batteries to wireless switch (batteries not included).
2. Turn wireless switch on
3. Turn wireless receiver on and activate pairing mode on the wireless receiver.
4. Activate the switch top on your wireless switch to pair with the wireless receiver
5. Turn pairing mode off on your wireless receiver
6. Your wireless switch is now ready to use with your wireless receiver.

Note: AbleNet wireless switches are only compatible with AbleNet wireless receivers and PowerLink 4.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.





ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



3 Device Overview

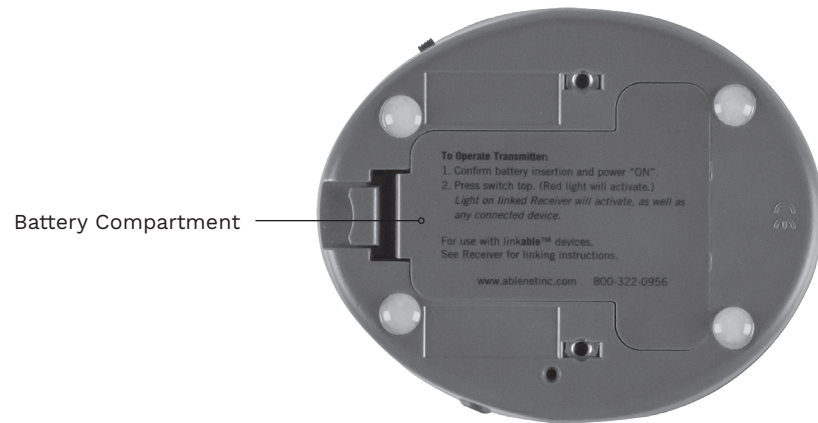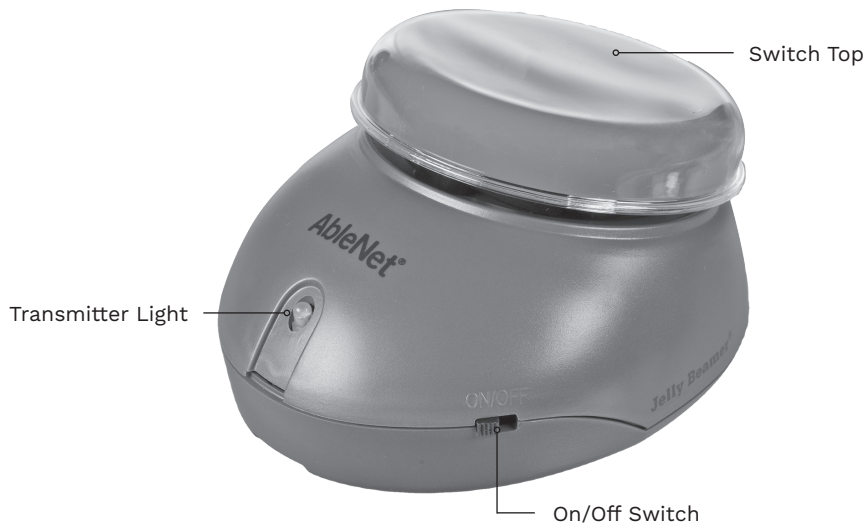

Create printable picture symbol overlays for your device with the *FREE* AbleNet Symbol Overlay Maker app. Scan the QR code to download today!



AbleNet®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Jelly Beamer™

commutateur d'accès sans fil

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:57 PM

1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



Mise en route :

1. Insérez deux piles alcalines AA (non fournies) dans le contacteur sans fil.
2. Mettez le bouton sans fil en marche.
3. Mettez le récepteur sans fil en marche et activez le mode d'appariement sur le récepteur sans fil.
4. Activez le dessus de contacteur sur votre bouton sans fil pour l'apparier au récepteur sans fil.
5. Désactivez le mode d'appariement sur votre récepteur sans fil.
6. Votre bouton sans fil est maintenant prêt à être utilisé avec votre récepteur sans fil.

Remarque : Les boutons sans fil AbleNet sont seulement compatibles avec les récepteurs sans fil et le Powerlink 4.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.




ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



3 Vue d'ensemble de l'appareil

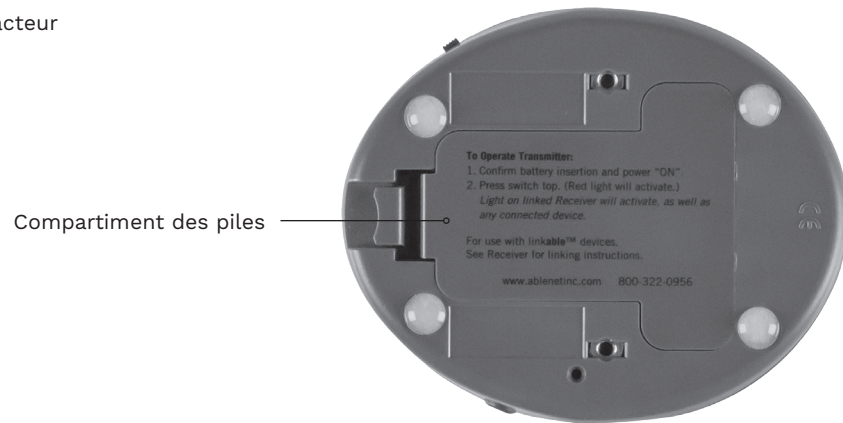

Créez des calques de pictogramme à imprimer pour votre appareil à l'aide de l'application gratuite AbleNet Symbol Overlay Maker. Balayez le code QR pour télécharger l'application maintenant !



AbleNet®

KURZANLEITUNG

Jelly Beamer™

Funk-Zugänglichkeitsschalter

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:57 PM

1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



Erste Schritte:

1. Setzen Sie zwei Alkaline AA-Batterien in den kabellosen Schalter ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schalten Sie den kabellosen Schalter ein
3. Schalten Sie denn Funkempfänger ein und aktivieren Sie den Paarungsmodus auf dem Funkempfänger.
4. Aktivieren Sie den Schalteroberteil auf Ihrem Funkempfänger ein, um mit dem Funkempfänger zu paaren
5. Schalten Sie den Paarungsmodus an Ihrem Funkempfänger aus
6. Ihr kabelloser Schalter ist nun einsatzbereit und kann nun mit Ihrem Funkempfänger verwendet werden.

Hinweis: Kabellose Schalter von AbleNet sind ausschließlich mit Funkempfänger von AbleNet und PowerLink 4 kompatibel.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.



ableCARE™


Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3

Geräteübersicht

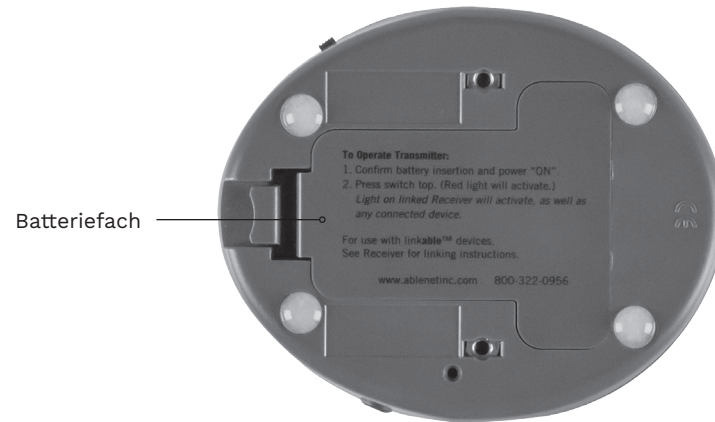

Erstellen Sie mit der KOSTENLOSEN Symbol Overlay Maker-App von AbleNet druckbare Bild-Symbolschablonen für Ihr Gerät. Scannen Sie den QR-Code, um die App heute herunterzuladen!



AbleNet®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Jelly Beamer™

Interruptor de accesibilidad inalámbrico

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:57 PM

1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



Para empezar:

1. Coloque dos pilas AA alcalinas al interruptor inalámbrico (pilas no incluidas).
2. Encienda el interruptor inalámbrico.
3. Encienda el receptor inalámbrico y active el modo de emparejamiento en el receptor inalámbrico.
4. Active la parte superior del interruptor en su interruptor inalámbrico para emparejar con el receptor inalámbrico.
5. Desactive el modo de emparejamiento en su receptor inalámbrico.
6. Su interruptor inalámbrico ahora está listo para usarse con su receptor inalámbrico.

Nota: Los interruptores inalámbricos AbleNet solo son compatibles con los receptores inalámbricos AbleNet y PowerLink 4.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.




ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3 Descripción general del dispositivo

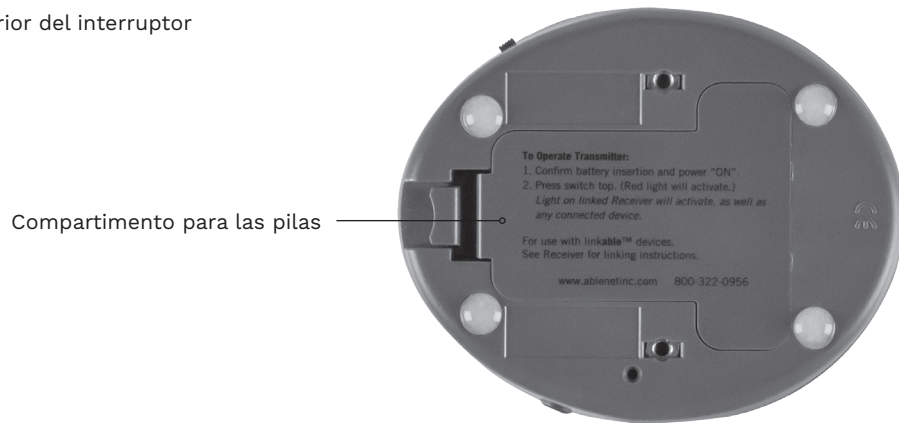

Cree rápida y fácilmente superposiciones de símbolos de imágenes imprimibles para su dispositivo con la aplicación GRATUITA AbleNet Symbol Overlay Maker. ¡Escanee el código QR para descargarla hoy!

