



QUICK START GUIDE
BigBlu VisionBoard™
Bluetooth keyboard

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Made with recycled content

EN June 18, 2021 1:45 PM

1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



To get started:

1. Remove the battery compartment door by removing the screw.
2. Insert two alkaline AAA batteries and replace the battery compartment door and screw.
3. Turn the on/off switch on. The LED indicator light will blink blue once.
4. Press the pairing button to enable the keyboard pairing mode. The LED indicator light will blink blue until the keyboard is paired or until 2-minutes has passed.
5. Select and pair the keyboard within the Bluetooth settings of your device. Please consult the Bluetooth pairing process for your device as needed.
6. The LED indicator light will stop blinking after completing the pairing process.
7. Your keyboard is now ready to use.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.



ableCARE™


Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



3

Device Overview

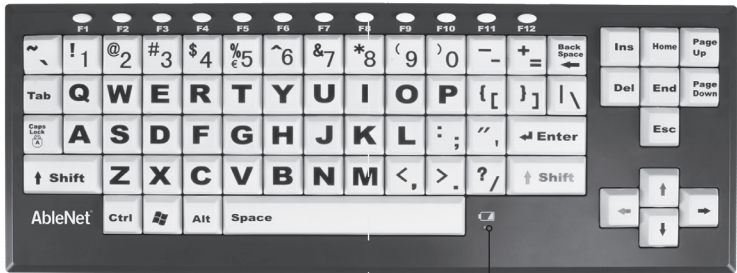

LED Indicator Light



On/Off Switch

Bluetooth Pairing Button

Battery Compartment

AbleNet®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

BigBlu VisionBoard™ clavier Bluetooth

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:45 PM

1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



Mise en route :

1. Retirez le capot du compartiment des piles en dévissant les vis.
2. Insérez deux piles alcalines AAA et remplacez le capot du compartiment ainsi que les vis.
3. Mettez le commutateur Marche/Arrêt en position Marche. Le voyant lumineux DEL clignotera une fois en bleu.
4. Appuyez sur le bouton d'appairage pour activer le mode Appairage du clavier. Le voyant lumineux DEL clignote du bleu jusqu'à l'appariement effectif du clavier ou jusqu'à ce que deux minutes soient passées.
5. Sélectionnez et appariez le clavier depuis les réglages Bluetooth de votre appareil. Veuillez consulter les instructions d'appariement Bluetooth de votre appareil au besoin.
6. Le voyant lumineux DEL arrête de clignoter une fois le processus d'appairage terminé.
7. Votre clavier est maintenant prêt à être utilisé.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.




ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



3 Vue d'ensemble de l'appareil

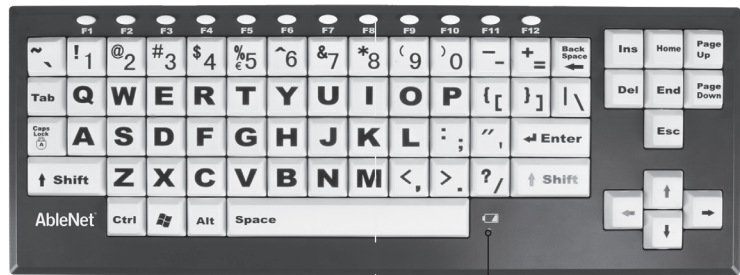

Voyant lumineux DEL



Commutateur Marche/Arrêt (On/Off)

Bouton d'appariement Bluetooth

Compartiment des piles

AbleNet®

KURZANLEITUNG

BigBlu VisionBoard™ Bluetooth-Tastatur

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantiefinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:45 PM

1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



Erste Schritte:

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Schraube entfernen.
2. Setzen Sie zwei Alkaline AAA-Batterien ein und ersetzen Sie die Batteriefachabdeckung und -schraube.
3. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein. Die LED-Anzeigelampe wird einmal blau aufleuchten.
4. Drücken Sie die Kopplungstaste, um den Kopplungsmodus der Tastatur zu aktivieren. Die LED-Anzeigelampe blinkt blau, bis die Tastatur gekoppelt ist oder bis zum Ablauf von 2 Minuten.
5. Wählen Sie die Tastatur in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aus und paaren Sie sie. Bei Bedarf konsultieren Sie bitte den Bluetooth-Paarungsprozess für Ihr Gerät.
6. Die LED-Anzeigelampe blinkt nach Abschluss des Kopplungsvorgangs nicht mehr.
7. Ihre Tastatur ist jetzt einsatzbereit.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.



ableCARE™


Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3

Geräteübersicht

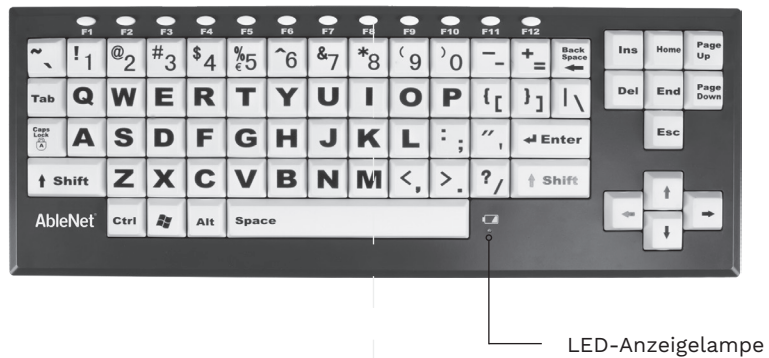

Ein-/ Aus-Schalter

Bluetooth-Kopplungstaste

Batteriefach

AbleNet®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BigBlu VisionBoard™

Teclado Bluetooth

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:45 PM

1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



Para empezar:

1. Quite la puerta del compartimento para las pilas quitando el tornillo.
2. Inserte dos pilas AAA alcalinas y vuelva a colocar la puerta del compartimento para las pilas y el tornillo.
3. Encienda el interruptor de encendido/apagado. La luz indicadora LED parpadeará en azul una vez.
4. Presione el botón de emparejar para habilitar el modo de emparejamiento del teclado. La luz indicadora LED parpadeará en azul hasta que el teclado esté emparejado o hasta que hayan pasado 2 minutos.
5. Seleccione y empareje el teclado dentro de la configuración de Bluetooth de su dispositivo. Consulte el proceso de emparejamiento de Bluetooth para su dispositivo según sea necesario.
6. La luz indicadora LED dejará de parpadear después de completar el proceso de emparejamiento.
7. Su teclado ya está listo para usar.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.




ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3 Descripción general del dispositivo

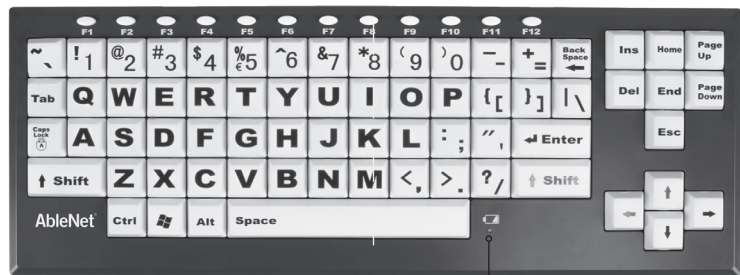

Luz indicadora LED



Interruptor de encendido/apagado

Botón de emparejar Bluetooth

Compartimento para las pilas