

AbleNet[®]

QUICK START GUIDE

Duo[™]

wireless computer mouse

WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Made with recycled content

EN June 18, 2021 1:46 PM

1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



To get started - Bluetooth:

1. Insert two alkaline AAA batteries into Duo wireless mouse.
2. Remove the USB wireless receiver from the bottom of the Duo wireless mouse. The USB wireless receiver is not used with a Bluetooth connection, but would be used if a device does not have Bluetooth.
3. Open Bluetooth settings on device you are pairing mouse to.
4. Move Duo wireless mouse mode switch towards the Bluetooth icon to turn on Bluetooth mode.
5. Activate Bluetooth pairing button on Duo wireless mouse for 5-seconds and then release.
6. On your device, select ANDUO from the list of Bluetooth devices available.
7. Your mouse is ready to use.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.

To get started - USB Wireless Receiver:

1. Insert two alkaline AAA batteries into Duo wireless mouse.
2. Remove the USB wireless receiver from the bottom of the Duo wireless mouse and insert it into a USB A port on your device.
3. Move the mode switch towards the USB receiver icon to turn on USB wireless mode.
4. Your mouse is now ready to use.

This device can do more! Full Instructions for Use are available at www.ablenetinc.com.


Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



3

Device Overview

Right-click Button

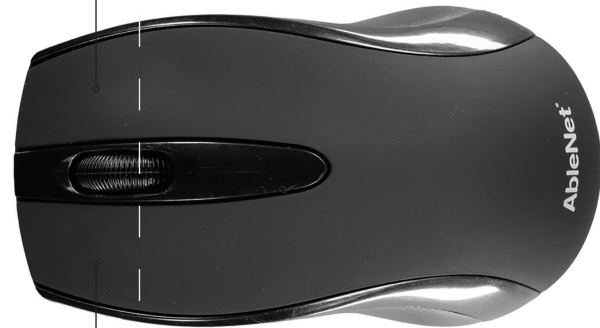

Left-click Button

Bluetooth Pairing Button



Battery Compartment

USB Wireless Receiver

Mode Switch

AbleNet®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Duo™

souris d'ordinateur sans fil

GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:46 PM

1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



Mise en route du Bluetooth:

1. Insérez deux (2) piles alcalines AAA dans la souris sans fil Duo.
2. Retirez le récepteur USB sans fil de la partie inférieure de la souris sans fil Duo. Le récepteur USB sans fil n'est pas utilisé avec une connexion Bluetooth, mais peut être utilisé si un appareil n'est pas équipé de Bluetooth.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil auquel vous comptez brancher la souris.
4. Déplacez le commutateur de mode de la souris sans fil Duo vers l'icône Bluetooth pour activer le mode Bluetooth.
5. Activez le bouton d'appairage Bluetooth sur la souris sans fil Duo pendant 5 secondes, puis relâchez-le.
6. Sur votre appareil, sélectionnez ANDUO depuis la liste des appareils Bluetooth disponibles.
7. Votre souris est prête à être utilisée.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

Mise en route du récepteur USB sans fil :



1. Insérez deux (2) piles alcalines AAA dans la souris sans fil Duo.
2. Retirez le récepteur USB sans fil de la partie inférieure de la souris sans fil Duo et insérez-le dans un port USB A de votre appareil.
3. Déplacez le commutateur de mode vers l'icône de récepteur USB pour activer le mode USB sans fil.
4. Votre souris est maintenant prête à être utilisée.

Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse www.ablenetinc.com.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



3 Vue d'ensemble de l'appareil

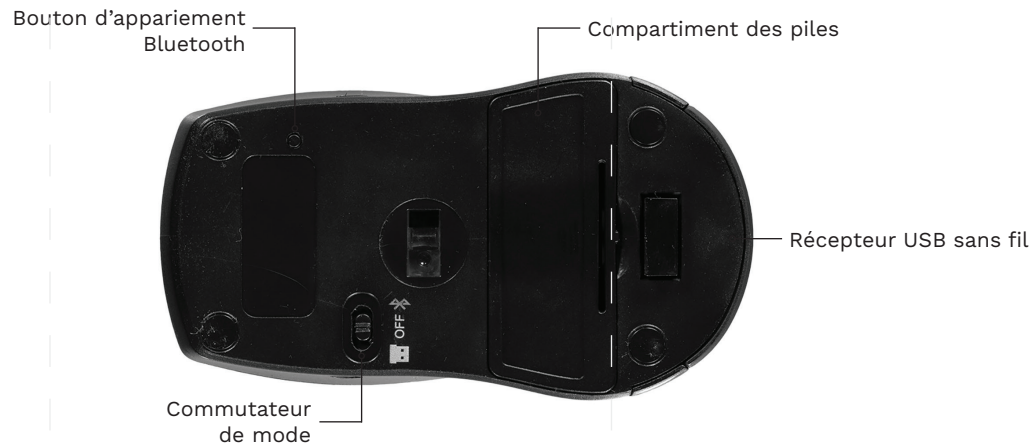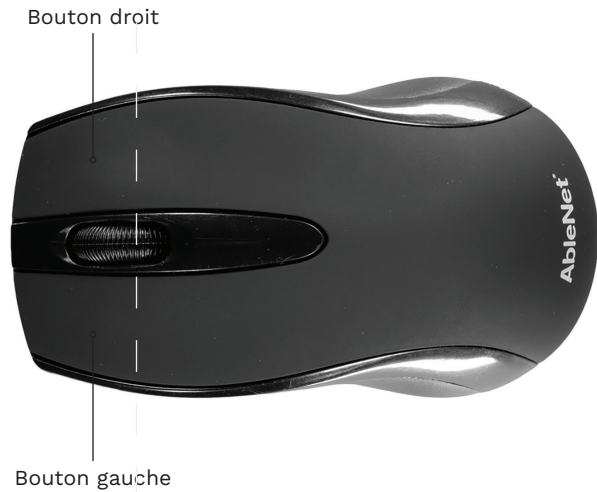

AbleNet®

KURZANLEITUNG

Duo™ Funk-Computermaus

GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:46 PM

1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



Erste Schritte - Bluetooth:

1. Stecken Sie zwei Alkaline AAA-Batterien in die Duo-Funkmaus ein.
2. Entfernen Sie den USB-Funkempfänger von der Unterseite der Duo-Funkmaus. Der USB-Funkempfänger wird nicht für eine Bluetooth-Verbindung verwendet, kann aber genutzt werden, wenn ein Gerät nicht über Bluetooth verfügt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf dem Gerät, mit dem Sie die Maus koppeln möchten.
4. Bewegen Sie den Modusschalter der Duo-Funkmaus in Richtung des Bluetooth-Symbols, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
5. Halten Sie die Bluetooth-Kopplungstaste auf der Duo-Funkmaus 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
6. Wählen Sie auf Ihrem Gerät aus der Liste mit den verfügbaren Bluetooth-Geräten ANDUO aus.
7. Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.

Erste Schritte - USB-Funkempfänger:

1. Stecken Sie zwei Alkaline AAA-Batterien in die Duo-Funkmaus.
2. Nehmen Sie den USB-Funkempfänger von der Unterseite der Duo-Funkmaus ab und stecken Sie ihn in einen USB-A-Anschluss an Ihrem Gerät ein.
3. Bewegen Sie den Modusschalter in Richtung des USB-Funkempfänger-Symbols, um den USB-Funkmodus zu aktivieren.
4. Ihre Maus ist jetzt einsatzbereit.

Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.ablenetinc.com.


Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3

Geräteübersicht

Rechtsklick-Taste

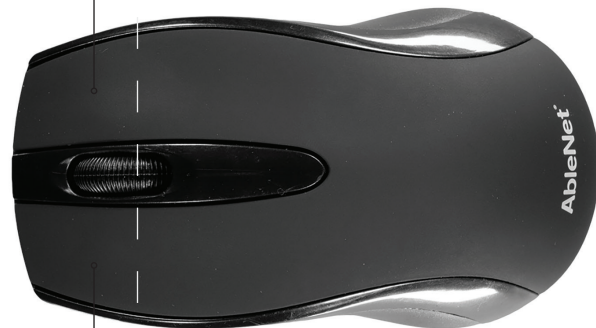

Linksklick-Taste

Bluetooth-Kopplungstaste



Batteriefach

USB-Funkempfänger

Modusschalter

AbleNet®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Duo™

Ratón inalámbrico para ordenado

GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(651) 294-3101
ablecare@ablenetinc.com
www.ablenetinc.com



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:46 PM

1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



Para empezar - Bluetooth:

1. Inserte dos pilas AAA alcalinas en el ratón inalámbrico Duo.
2. Retire el receptor inalámbrico USB de la parte inferior del ratón inalámbrico Duo. El receptor inalámbrico USB no se usa con conexión Bluetooth, se usa en dispositivos que no tienen Bluetooth.
3. Abra la configuración de Bluetooth en el dispositivo con el que está emparejando el ratón.
4. Mueva el interruptor de modo del ratón inalámbrico Duo hacia el icono de Bluetooth para activar el modo Bluetooth.
5. Manténgalo para activar el botón de conexión Bluetooth en el ratón inalámbrico Duo durante 5 segundos y luego suéltelo.
6. En su dispositivo, seleccione ANDUO en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
7. Su ratón ya está listo para usar.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.

Para empezar - Receptor inalámbrico USB:

1. Inserte dos pilas AAA alcalinas en el ratón inalámbrico Duo.
2. Quite el receptor inalámbrico USB de la parte inferior del ratón inalámbrico Duo e insértelo en un puerto USB A de su dispositivo.
3. Mueva el interruptor de modo hacia el icono del receptor USB para activar el modo inalámbrico USB.
4. Su ratón ya está listo para usar.

¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en www.ablenetinc.com.


Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



3 Descripción general del dispositivo

Botón de clic derecho

Botón de clic izquierdo

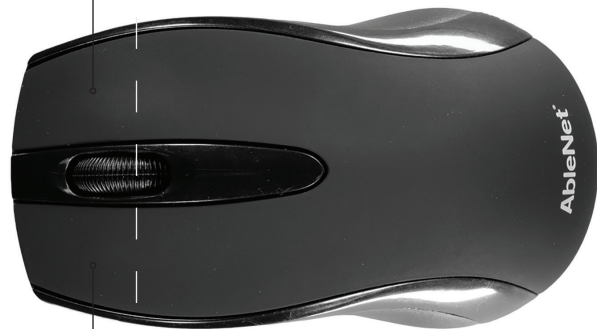

Botón de emparejar Bluetooth

Compartimento para las pilas

Receptor USB inalámbrico

Interruptor de modo

