



## QUICK START GUIDE

### PowerLink® 4 power control unit

#### WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Made with recycled content

## 1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



## 2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



### To get started:

1. Plug the PowerLink into any AC wall outlet with the cord provided and turn the device on.
2. Plug appliance(s) to either power cable on the side of the PowerLink and turn the appliance(s) on.
3. Test your AC power connection by pressing the appropriate test button. The attached appliance should activate.
4. Attach any corded, single switch(es) to the corresponding switch jack(s).
5. Press the mode button until the “direct” mode LED lights up.
6. Press and hold switch(es) to activate their corresponding appliances. Release to turn off.

*This device can do more! Full Instructions for Use are available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



### 3 Device Overview

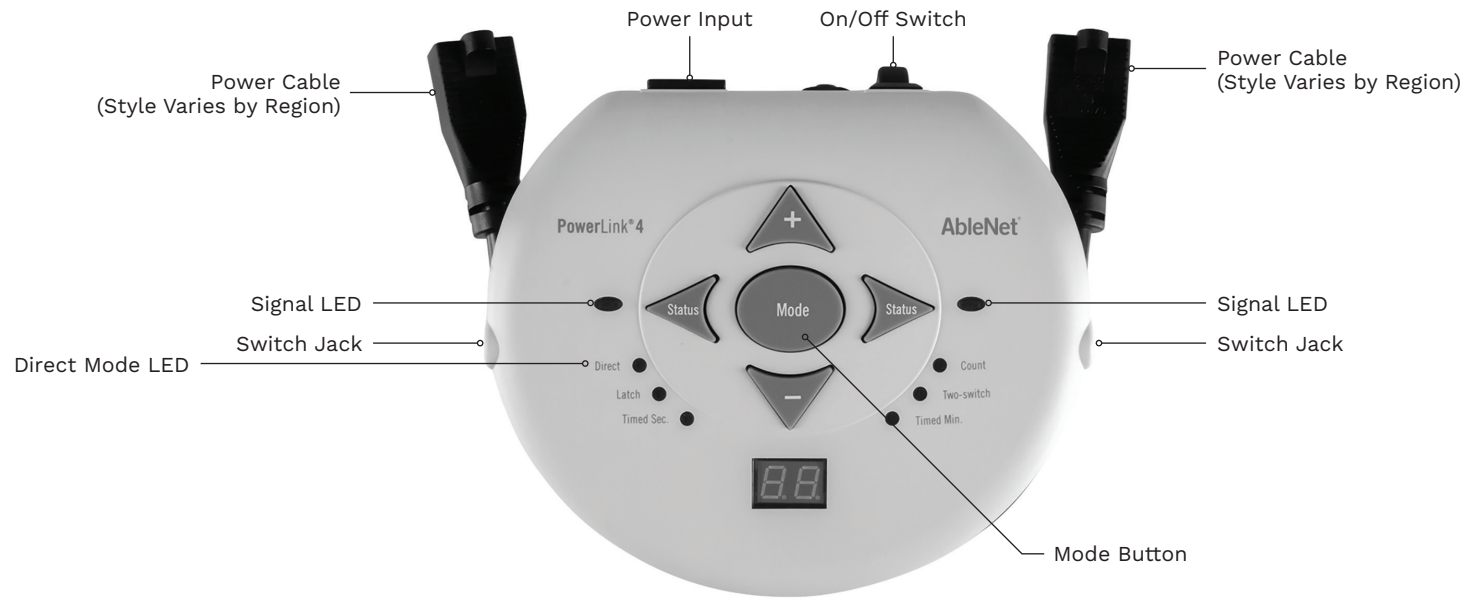

# AbleNet®

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### PowerLink® 4 PCU

#### GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 1:58 PM

## 1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



## 2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



### Mise en route :

1. Branchez le PowerLink à une prise murale de courant alternatif à l'aide du cordon fourni et allumez l'appareil.
2. Branchez les appareils à l'un des deux câbles d'alimentation sur le côté du PowerLink et allumez les appareils.
3. Testez l'alimentation en courant alternatif en appuyant sur le bouton Test approprié. L'appareil branché doit s'activer.
4. Branchez tout contacteur simple à cordon sur la prise de contacteur correspondante.
5. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que s'allume le voyant de mode Direct.
6. Appuyez en continu sur les contacteurs pour activer l'appareil correspondant. Relâchez pour éteindre.

*Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



### 3 Vue d'ensemble de l'appareil

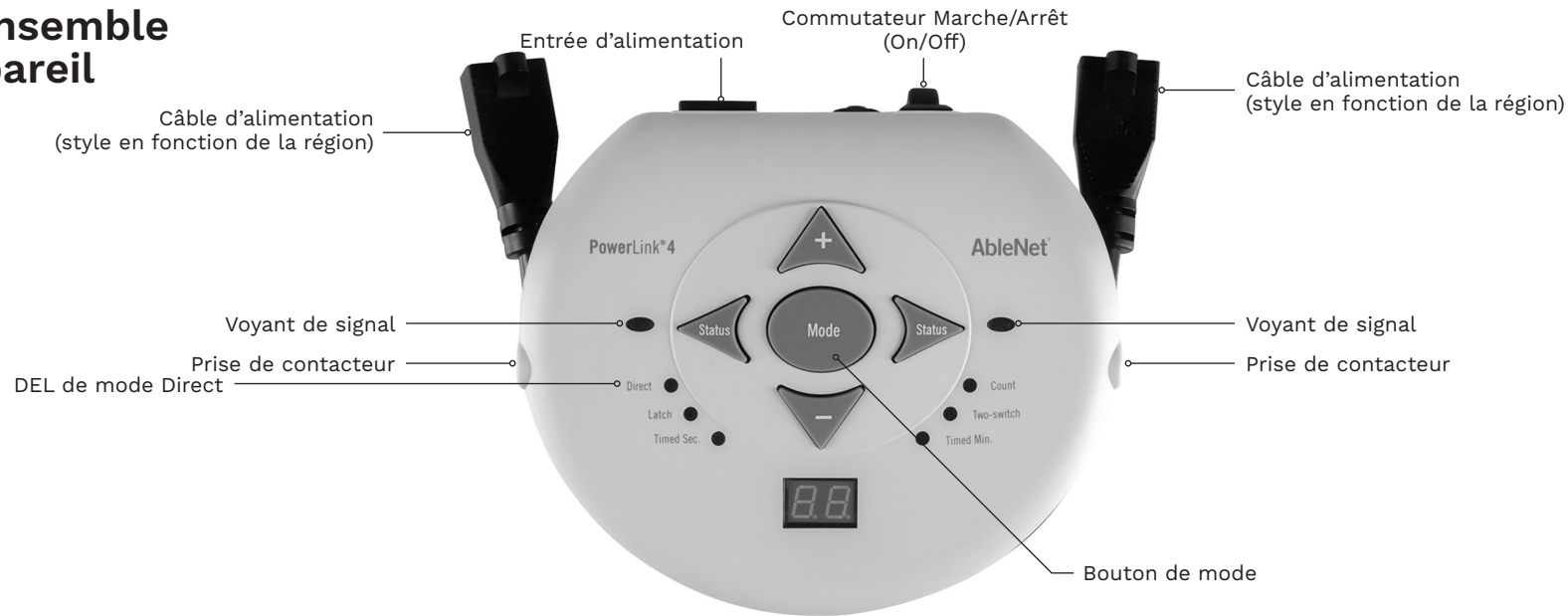

# AbleNet®

## KURZANLEITUNG

### PowerLink® 4

#### Leistungssteuereinheit

#### GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 1:58 PM

## 1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



## 2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



### Erste Schritte:

1. Das mitgelieferte PowerLink Netzkabel in eine Wandsteckdose stecken und das Gerät einschalten.
2. Eines oder zwei Elektrogeräte an einem bzw. beiden seitlichen Stromkabeln des PowerLink einstecken und das(die) Elektrogerät(e) einschalten.
3. Zum Prüfen des Stromanschlusses die entsprechende Testtaste drücken. Das verbundene Gerät sollte aktiviert werden.
4. Einen mit Kabel versehenen Einzelschalter an der(den) entsprechenden Buchse(n) einstecken.
5. Die Modustaste drücken, bis die LED für „Direkt“-Modus aufleuchtet.
6. Den(die) Schalter drücken und gedrückt halten, um die entsprechenden Elektrogeräte zu aktivieren. Zum Ausschalten der Geräte den(die) Schalter wieder loslassen.

*Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



3

## Geräteübersicht

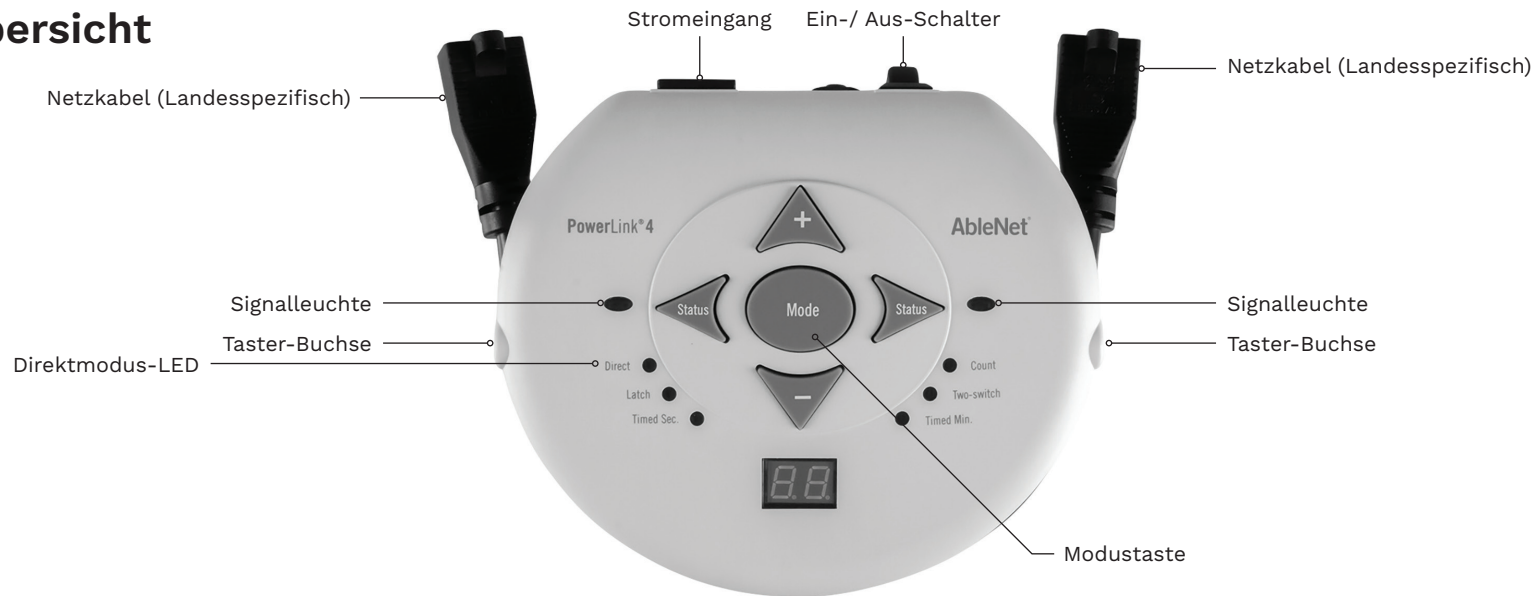



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### PowerLink® 4

Unidad de control de potencia

#### GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 1:58 PM



## Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



## Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



### Para empezar:

1. Enchufe el PowerLink en cualquier toma de corriente alterna con el cable proporcionado y encienda el dispositivo.
2. Enchufe los electrodomésticos a cualquiera de los cables eléctricos a un lado del PowerLink y enciéndalos.
3. Pruebe su conexión de corriente alterna presionando el botón de prueba apropiado. El electrodoméstico acoplado debe activarse.
4. Acople los interruptores simples con cable a los conectores correspondientes.
5. Presione el botón Modo hasta que se encienda la luz LED del modo "Direct" (Directo).
6. Mantenga presionado los interruptores para activar sus electrodomésticos correspondientes. Suelte los interruptores para apagarlos.

*¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™

Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



### 3 Descripción general del dispositivo

