



## QUICK START GUIDE

# QuickTalker™ FT 7/12/23

speech device

### WARRANTY

AbleNet manufactured products include a 2-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for 2-years from the date of purchase. Full warranty details available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Made with recycled content

EN June 18, 2021 2:13 PM

## 1 Product Registration

Registering your product provides you access to ableCARE, product updates, and resources for your product. Scan the QR code below to register your product.



## 2 Getting Started

Scan the QR code below to watch a short getting started video or follow the instructions listed.



### To get started:

1. Add four alkaline AA batteries to device (batteries not included).
2. Add a printed picture symbol overlay to device (not included).
3. Turn device on.
4. Select recording level.
5. Press and hold the record button until the recording indicator light turns on, then release the record button.
6. Press and release the desired message location. Begin speaking into microphone to record message. Press and release the desired message location a second time to stop recording.
7. Repeat step 6 for other message locations.
8. Press record button to turn the recording indicator light off and exit record mode.
9. Your device is now ready to use.

*This device can do more! Full Instructions for Use are available at [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Download the ableCARE app to access live support from the ableCARE Product Success team, an online knowledge base filled with videos and getting started information, and other resources.

Scan the QR code below to download the free ableCARE app to your phone or tablet.



# 3 Device Overview

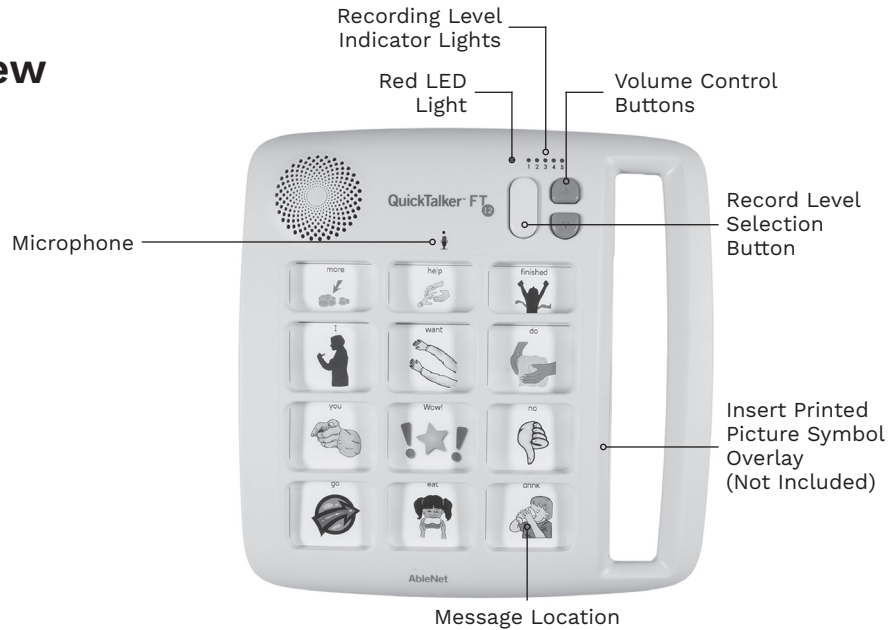

Create printable picture symbol overlays for your device with the *FREE* AbleNet Symbol Overlay Maker app. Scan the QR code to download today!



# AbleNet®

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### QuickTalker™ FT 7/12/23

dispositif de parole

#### GARANTIE

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux (2) ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les détails de la garantie se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fait de matières recyclées

FR June 18, 2021 2:13 PM

## 1 Enregistrement de produit

L'enregistrement de votre produit vous donne accès à ableCARE ainsi qu'à des mises à jour et des ressources pour votre produit. Balayez le code QR ci-dessous pour enregistrer votre produit.



## 2 Mise en route

Balayez le code QR ci-dessous pour visionner une courte vidéo de mise en route ou suivez les instructions listées ici.



### Mise en route :

1. Insérez quatre piles alcalines AA (non fournies) dans l'appareil.
2. Ajoutez un calque de pictogramme imprimé sur l'appareil (non fourni).
3. Allumez l'appareil.
4. Sélectionnez le niveau d'enregistrement.
5. Appuyez sans relâcher sur le bouton d'enregistrement jusqu'à ce que le voyant d'enregistrement s'allume, puis relâchez-le.
6. Appuyez brièvement sur l'emplacement de message désiré. Commencez à parler dans le micro pour enregistrer le message. Appuyez à nouveau brièvement sur l'emplacement de message désiré pour arrêter l'enregistrement.
7. Répétez l'étape 6 pour les autres emplacements de message.
8. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour éteindre le voyant d'enregistrement et quitter le mode d'enregistrement.
9. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

*Votre appareil peut en faire bien plus ! Les instructions d'utilisation complètes se trouvent à l'adresse [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Téléchargez l'application ableCARE pour avoir accès à de l'assistance en direct de la part de l'équipe de produit ableCARE ainsi qu'à une banque de connaissances en ligne remplies de vidéos, d'information de mise en route et de diverses ressources.

Balayez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application ableCARE sur votre mobile ou votre tablette.



### 3 Vue d'ensemble de l'appareil

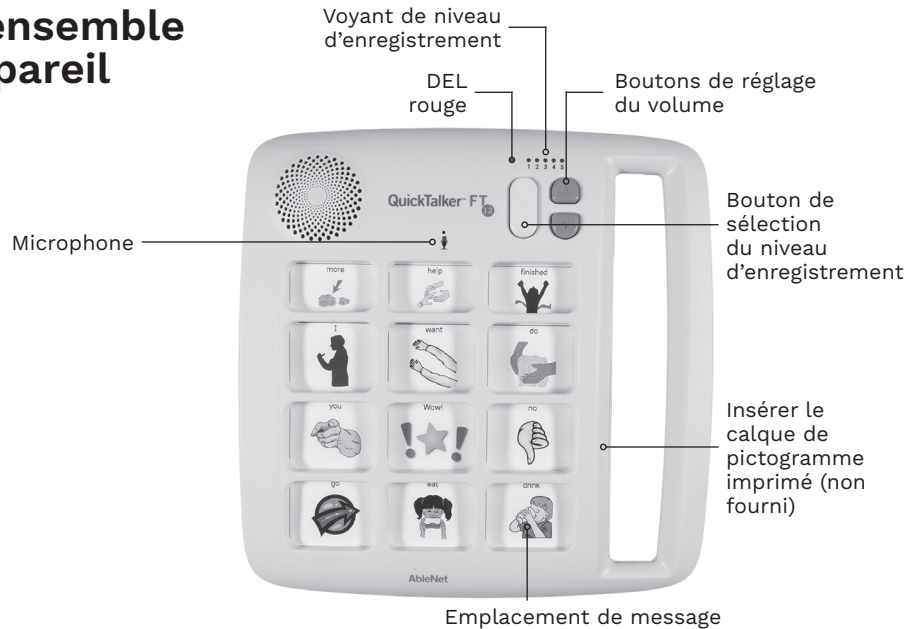

Créez des calques de pictogramme à imprimer pour votre appareil à l'aide de l'application gratuite AbleNet Symbol Overlay Maker. Balayez le code QR pour télécharger l'application maintenant !



# AbleNet®

## KURZANLEITUNG

### QuickTalker™ FT 7/12/23

Sprachgerät

#### GARANTIE

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine 2-jährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Ausführliche Garantieinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Hergestellt aus recycelten Inhalten

GE June 18, 2021 2:13 PM

## 1 Produktregistrierung

Die Registrierung Ihres Produkts bietet Ihnen Zugang zu Produkt-Updates und Ressourcen von ableCARE. Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren.



## 2 Allgemeine Beschreibung

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um ein kurzes Video über die ersten Schritte zu sehen oder folgen Sie den aufgeführten Anweisungen.



### Erste Schritte:

1. Setzen Sie vier Alkaline AA-Batterien in das Gerät ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Setzen Sie eine gedruckte Bild-Symbolschablone in dem Gerät ein (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Schalten Sie das Gerät an.
4. Wählen Sie die Aufnahmestufe.
5. Halten Sie die Taste RECORD (Aufnahme) gedrückt, bis die Aufnahme-Anzeigelampe aufleuchtet, und lassen Sie dann die Taste RECORD los.
6. Das Feld für die gewünschte Mitteilung drücken und loslassen. Sprechen Sie in das Mikrofon, um eine Mitteilung aufzunehmen. Das Feld für die gewünschte Mitteilung ein zweites Mal drücken und loslassen, um die Aufnahme zu beenden.
7. Wiederholen Sie Schritt 6 für weitere Mitteilungsfelder.
8. Drücken Sie die Taste RECORD, um die Aufnahme-Anzeigelampe auszuschalten und den Aufnahmemodus zu verlassen.
9. Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.

*Dieses Gerät kann noch mehr! Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*




ableCARE™

Durch Herunterladen der ableCARE-App erhalten Sie Zugriff auf den Live-Support des Produkterfolgsteams von ableCARE, auf eine Online-Wissensdatenbank mit Videos und Informationen zu den ersten Schritten einschließlich weiterer Ressourcen.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die kostenlose ableCARE-App auf Ihr Telefon oder Tablet herunterzuladen.



# 3 Geräteübersicht

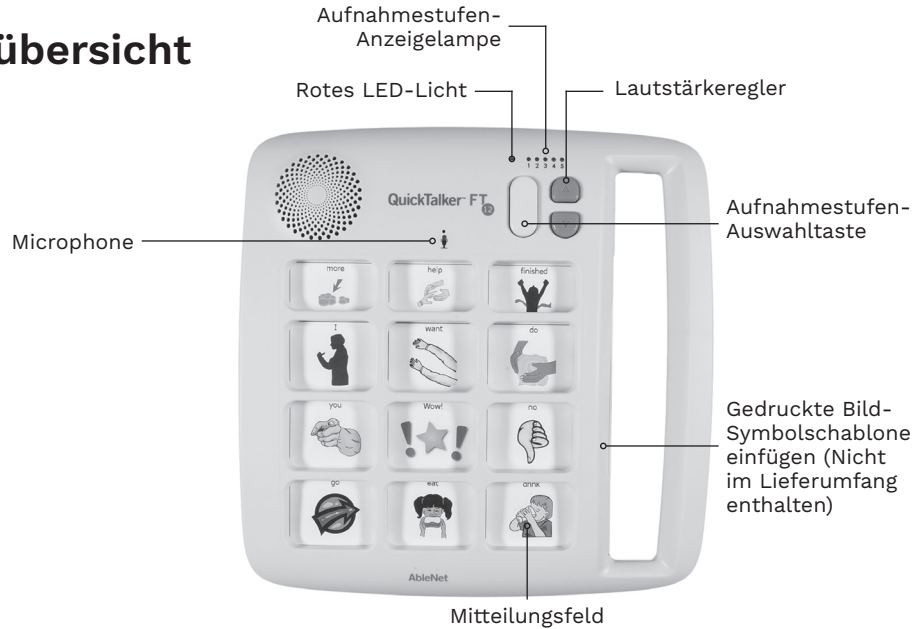

Erstellen Sie mit der KOSTENLOSEN Symbol Overlay Maker-App von AbleNet druckbare Bild-Symbolschablonen für Ihr Gerät. Scannen Sie den QR-Code, um die App heute herunterzuladen!





## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# QuickTalker™ FT 7/12/23

Dispositivo de voz

### GARANTÍA

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre defectos de materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Los detalles completos de la garantía están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).

AbleNet, Inc.  
2625 Patton Road  
Roseville, MN 55113  
United States of America  
(651) 294-3101  
[ablecare@ablenetinc.com](mailto:ablecare@ablenetinc.com)  
[www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com)



Fabricado con contenido reciclado.

SP June 18, 2021 2:13 PM

## 1 Registro del producto

El registro de su producto le proporciona acceso a ableCARE, actualizaciones de productos y recursos para su producto. Escanee el código QR a continuación para registrar su producto.



## 2 Primeros pasos

Escanee el código QR a continuación para ver un breve video de inicio o siga las instrucciones que se enumeran.



### Para empezar:

1. Coloque cuatro pilas AA alcalinas al dispositivo (pilas no incluidas).
2. Agregue una superposición de símbolos de imagen impresa al dispositivo (no incluida).
3. Encienda el dispositivo.
4. Seleccione el nivel de grabación.
5. Mantenga presionado el botón de grabación hasta que se encienda la luz indicadora de grabación, luego suelte el botón de grabación.
6. Presione y suelte la ubicación en la que desee guardar su mensaje. Comience a hablar por el micrófono para grabar el mensaje. Presione y suelte la ubicación en la que desee guardar su mensaje una vez más para detener la grabación.
7. Repita el paso 6 para otras ubicaciones de mensajes.
8. Presione el botón de grabación para apagar la luz indicadora de grabación y salir del modo de grabación.
9. Su dispositivo ya está listo para usar.

*¡Este dispositivo puede hacer más! Las instrucciones de uso completas están disponibles en [www.ablenetinc.com](http://www.ablenetinc.com).*



ableCARE™


Descargue la aplicación ableCARE para acceder al soporte en vivo del equipo de éxito del producto de ableCARE, una base de conocimientos en línea llena de videos e información de primeros pasos, y otros recursos.

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación ableCARE gratuita en su teléfono o tableta.



# 3

## Descripción general del dispositivo

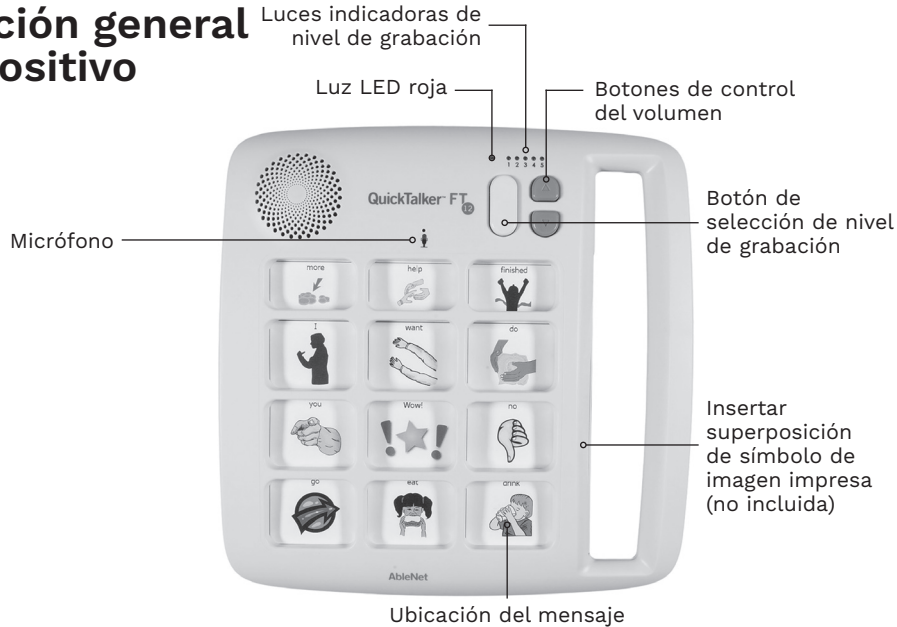

Interruptor de encendido/apagado

Botón de grabación

Compartimento para las pilas



Cree rápida y fácilmente superposiciones de símbolos de imágenes imprimibles para su dispositivo con la aplicación GRATUITA AbleNet Symbol Overlay Maker. ¡Escanee el código QR para descargarla hoy!

